

REVANESSE®

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ

ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ

PROLLENIUM™

PROLLENIUM® кількома словами

01

ГОЛОС КЛІЄНТІВ ВАЖЛИВИЙ

Наші клієнти знаходяться в центрі всього, що ми робимо. Відгуки клієнтів мають вирішальне значення.

> **Ми ведемо постійний діалог — слухаємо, відповідаємо та діємо!**

02

ПИШАЄМОСЯ КАНАДСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ REVANESSE®

Повністю розроблені та виготовлені в Канаді.

Наші 2 заводи розташовані в Онтаріо, Канада.

> **Ми є першим виробником філерів на основі гіалуронової кислоти на теренах всієї Північної Америки.**

03

ЗАТВЕРДЖЕНО FDA

Заснована в 2002 році, PROLLENIUM® є однією з небагатьох обраних, які отримали схвалення FDA.

> **Ми є однією з провідних компаній на ринку США.**

04

ЕКСПЕРТИ ТА НОВАТОРИ В ГАЛУЗІ ДЕРМАЛЬНИХ ФІЛЕРІВ

Наша команда дослідників і розробників постійно працює над інноваціями та вдосконаленням формул і технологій.

> **Ми настільки захоплені дермальними філерами, що це єдина сфера нашої діяльності!**

Як виготовляється REVANESSE®?

01

REVANESSE® ПОЄДНУЄ В СОБІ ВИСОКУ МОЛЕКУЛЯРНУ МАСУ (НМВ) ГК З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ВDDE.

«Високомолекулярна ГК максимально близька до власної ГК організму, потребує менше ВDDE для стабілізації і має найнижчу вірогідність бути розпізнаною імунною системою як чужорідне тіло».¹

03

РІЗНІ РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДОСЯГАЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ЗМІНИ ОКРЕМИХ ПАРАМЕТРІВ НАШИХ ГЕЛІВ ГК.

«Керуючись персоналізованим підходом до кожного конкретного призначення, ми змінюємо ступінь зшивання, розмір частинок та додаємо некрослінговану ГК, якщо це необхідно. Така кастомізація дозволяє нам створювати філери з різноманітними реологічними властивостями для різних призначень».

02


ГЕЛЬ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЗАПАТЕНТОВАНИЙ ПРОЦЕС ВОЛОГОГО ПОДРІБНЕННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ЧОГО УТВОРЮЮТЬСЯ СФЕРИЧНІ ЧАСТИНКИ.

«Сферичні частинки зазвичай мають меншу площу поверхні. Більш виразні запальні реакції характерні для частинок неправильної форми або тих, що мають більшу площу поверхні».²

04

ОПТИМІЗОВАНИЙ ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ ДЛЯ РЕТЕЛЬНОГО ВИДАЛЕННЯ ЗАЛИШКІВ ВDDE ТА ТОКСИНІВ.

«Наш унікальний 7-денний процес діалізу створює більш чистий продукт з нейтральним рН та збалансованою осмолярністю. Цей етап гарантує принцип "результату, що відповідає очікуванням", яким ми відомі. Ви отримуєте те, що бачите».

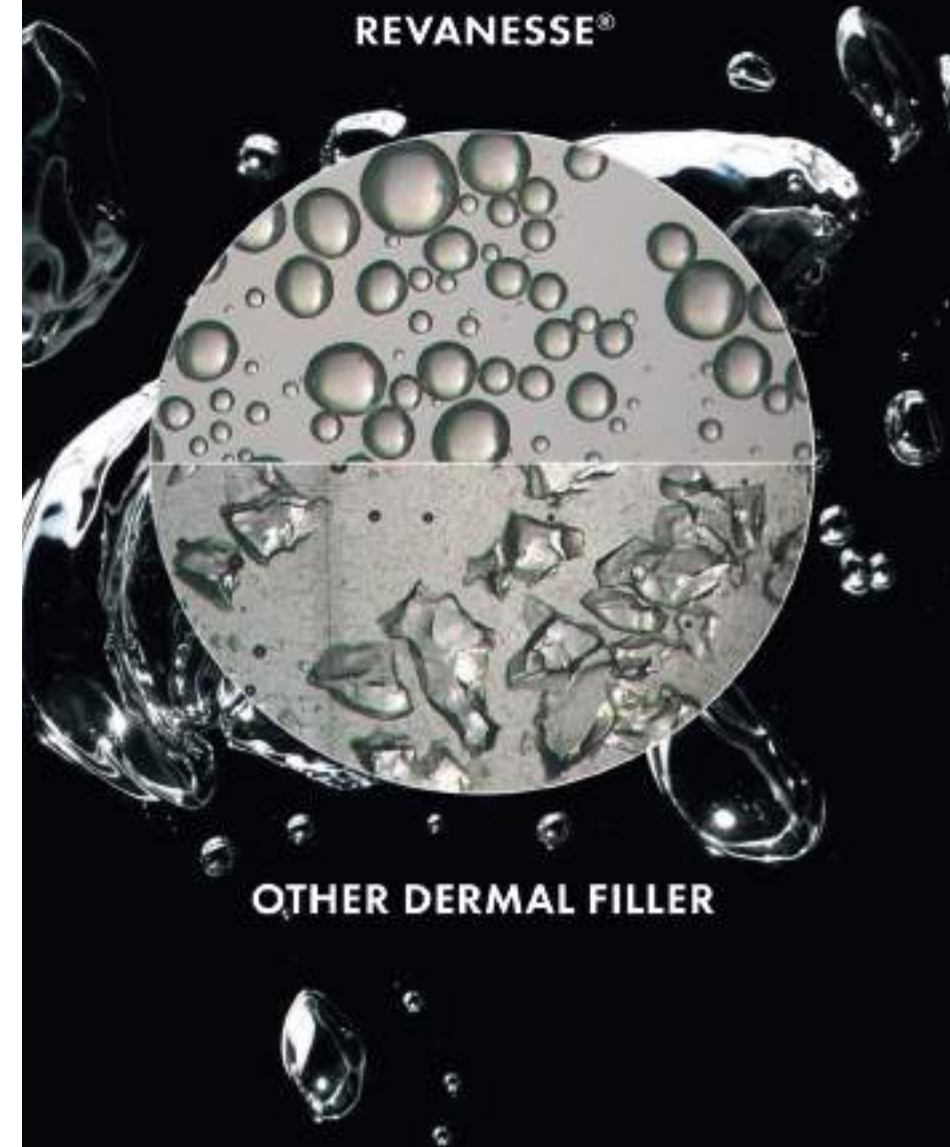


1. Edsman K, Nord U, Olund A та ін. Гелеві властивості дермальних наповнювачів гіалуронової кислоти. Dermatol Surg. 2012;38:1170-1179
2. Лешке К. Біосумісність мікрочастинок із наповнювачами м'яких тканин. Semin Cutan Med Surg. 2004 грудень;23(4):214-7


РОЗРОБЛЕНО ДЛЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

Гладкі, сферичні та однорідні частинки ГК

Гладкі та сферичні частинки сприяють кращій тканинній інтеграції, як доведено
знижують ризик виникнення реакції на наявність інородного тіла.¹

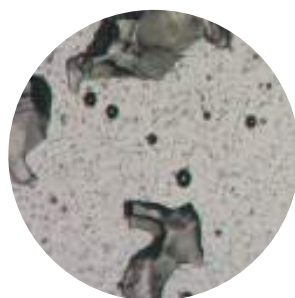


**ФІЛЕР
ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ А**

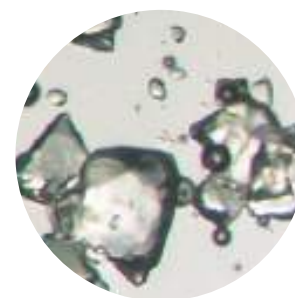

**ФІЛЕР
ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ В**



REVANESSE® ULTRA™

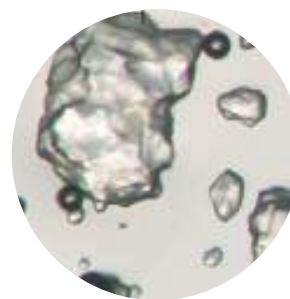

**ФІЛЕР
ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ С**





**ФІЛЕР
ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ D**

1. Laeschke K. Біосумісність мікрочастинок у наповнювачах м'яких тканин. Semin Cutan Med Surg. 2004 грудень;23(4):214-7

Менше болю та набряку

В одному з наших клінічних досліджень пацієнти, яким були зроблені корекції препаратом для порівняння, продемонстрували наявність набряків на 50% більше, ніж пацієнти, яким була зроблена корекція препаратом REVANESSE® ULTRA™. Крім того, пацієнти відзначали сильніший біль під час ін'єкції препарату-аналогу.*

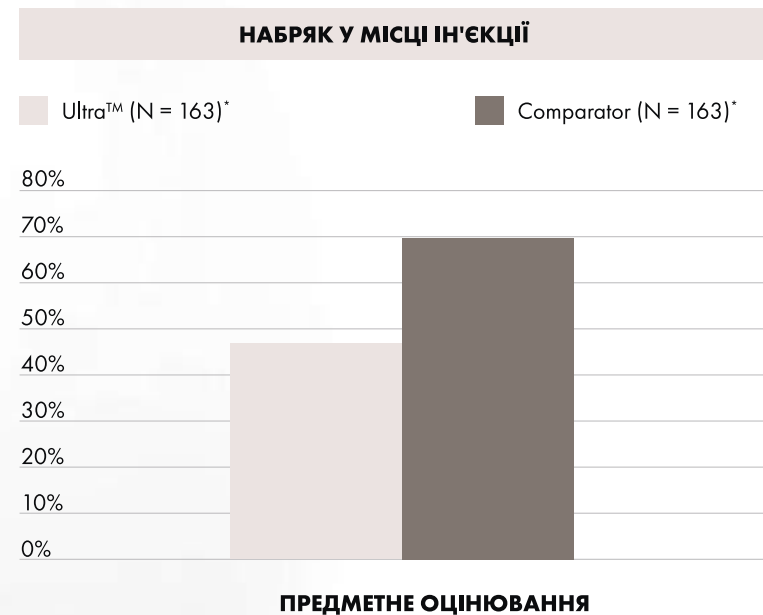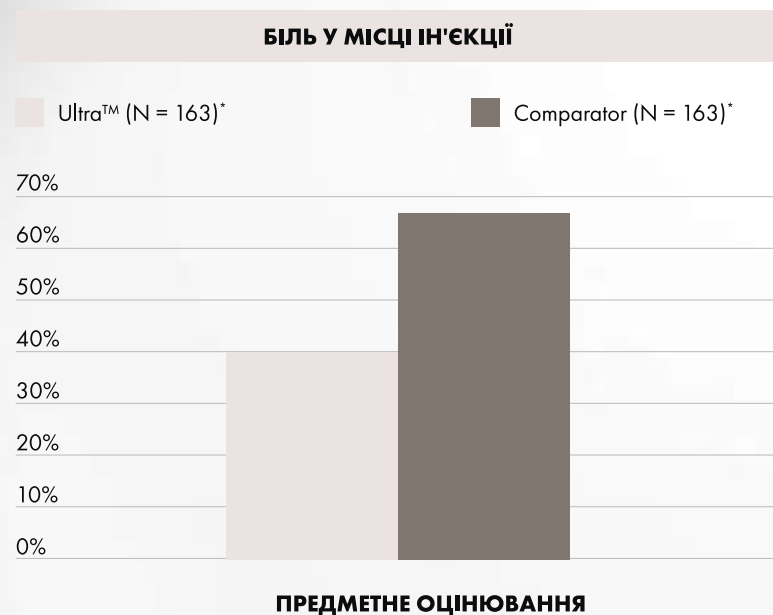

* Звіт про клінічне дослідження Revanesse® Ultra™ SYM 2014-02: багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване дослідження з розділеним обличчям для оцінки безпеки та ефективності Revanesse® Ultra™ проти Restylane® для корекції носогубних складок. Revanesse® Ultra™ є зареєстрованою торговою маркою Prolenium Medical Technologies Inc. Restylane® є зареєстрованою торговою маркою Nestlé Skin Health S.A.

ОПТИМІЗОВАНО
ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ТА
ЛОЯЛЬНОСТІ

Шприці 1,2 мл забезпечують додаткові 20% об'єму препарату в кожному шприці

ЦІННІСТЬ ДЛЯ ПАЦІЄНТА


Більше препарату = більше
терапевтичних можливостей,
задоволеність пацієнта та
довготривала лояльність.

ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЛІКАРЯ

Більше терапевтичних можливостей,
кращі результати.

ЕКОНОМІЧНА ПЕРЕВАГА

Отримайте високі результати,
максимізуючи рентабельність.

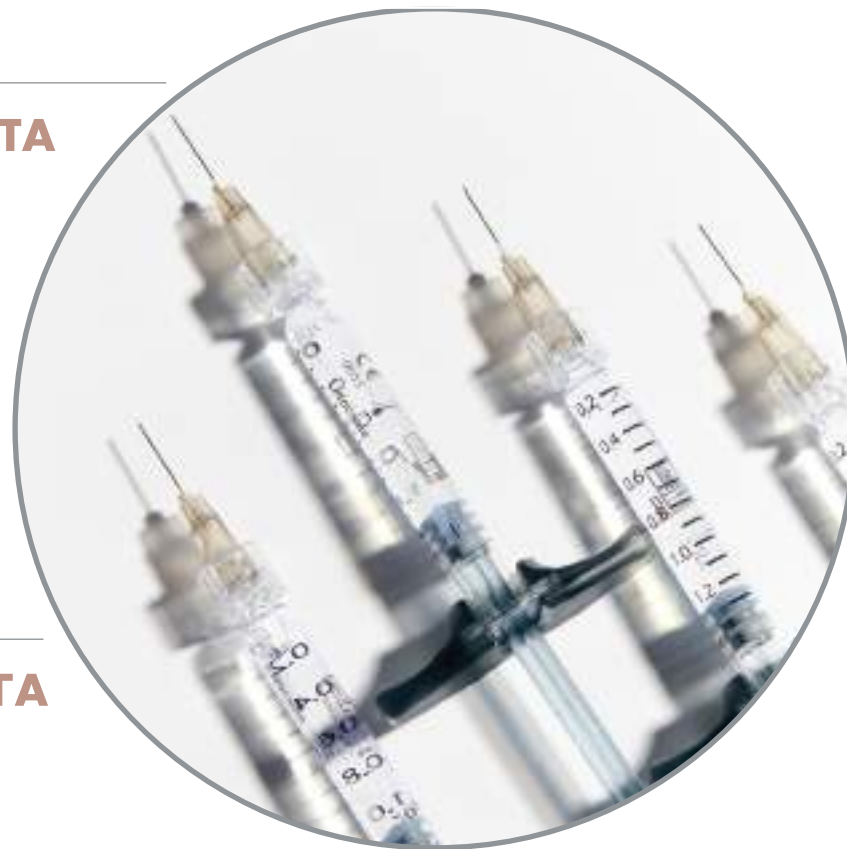

Верхня третина обличчя

Горизонтальні лінії лоба

Брови

Скроні

<<Гусячі лапки>>



weMED

○ PURE™+
Hydro-neutralize

● REVISE™+
Fill & Refirmate

● ULTRA™+
Fill & Volumise

● CONTOUR™+
Volumise & Sculpt

● SHAPE™+
Project & Lift



Середня третина обличчя

Носо-слізна борозна



Щоки



Носо-губна складка



Вилиці



weMED

● REVISE™+
Fill & Refine

● ULTRA™+
Fill & Volumise

● CONTOUR™+
Volumise & Sculpt

● SHAPE™+
Protect & Lift



Нижня третина обличчя

Лінія нижньої щелепи



Кут нижньої щелепи



Підборіддя



wemed


● CONTOUR™+
Volume & Sculpt

● SHAPE™+
Protect & Lift



Періоральна зона

Природній об'єм губ

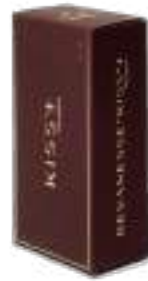

Об'ємна корекція губ, маріонетки



Об'єм та контур губ,
корекція верміліон
та фільтрум губ



Корекція періоральних
зморшок



weMED

○ PURE™+
Bio-revitalize

● REVISE™+
Fill & Rejuvenate

● KISS™+
Refresh & Rejuvenate

● ULTRA™+
Fill & Volume

● OUTLINE™+
Structure & Lift



Якість шкіри та поверхневі зморшки

Обличчя



Шия



Декольте










weMED

○ PURE™+
Bio-revitalize

● REVISE™+
Fill & Refirmate



REVANESSE® КОЛЕКЦІЯ ДЕРМАЛЬНИХ ФІЛЕРІВ НА ОСНОВІ ГК*

		NEW 					
	REVANESSE PURE™+	REVANESSE REVISE™+	REVANESSE KISS™+	REVANESSE ULTRA™+	REVANESSE CONTOUR™+	REVANESSE OUTLINE™+	REVANESSE SHAPE™+
КОНЦЕНТРАЦІЯ ГК	14mg/mL	12mg/mL	25mg/mL	25mg/mL	25mg/mL	25mg/mL	25mg/mL
В`ЯЗКІСТЬ	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●
РОЗМІР ЧАСТИНОК ¹	N/A	●	●	●	●	●	●
ПІДЙОМНА ЗДАТНІСТЬ (ЛІФТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ)	Дуже низька	Низька	Помірна	Помірна	Помірна/ Виразна	Виразна	Дуже виразна
ГЛИБИНА ІН`ЕКЦІЇ ³	Поверхнева дерма	Поверхнева/ середня дерма	Поверхнева/ середня дерма	Середня/ глибока дерма	Глибока дерма/ підшкірно	Глибока дерма/ підшкірно	Супраперіостально
РЕКОМЕНДОВАНІ ЗОНИ КОРЕКЦІЇ	Обличчя, шия, декольте, руки	Носослізна борозна, періорбітальна ділянка, зморшки та тонкі лінії, періоральна ділянка	Губи та періоральна ділянка	Скроні, середня третина обличчя, носогубні складки, губи, зморшки маріонетки	Скроні, середня третина обличчя, підборіддя, кути та лінія нижньої щелепи	Колони фільтрума, контур та об'єм губ	Середня третина обличчя, підборіддя, кути та лінія нижньої щелепи
КІЛЬКІСТЬ ШПРИЦІВ ТА ОБ'ЄМ	2 x 1.2mL	2 x 1.2mL	2 x 1.2mL	2 x 1.2mL	2 x 1.2mL	2 x 1.2mL	2 x 1.2mL
РОЗМІР ГОЛКИ В УПАКОВЦІ	30G	30G	27G	27G	27G	29G/27G*	27G

*Доступність продукту може змінюватися залежно від географічного розташування та конкретних регіонів.

**Ін'єкції ГК філерів у ці специфічні ділянки повинен виконувати лише кваліфікований та досвідчений фахівець.

1. Художнє зображення розмірів частинок HA не точно відображає фактичний розмір частинок HA у відповідному продукті.

2. На основі реологічних та фізико-хімічних властивостей кожного продукту.

3. Глибина ін'єкції, зони лікування або показання до застосування можуть відрізнятися в різних країнах, регіонах або територіях. Кваліфікований і підготовлений лікар повинен визначити глибину ін'єкції та зони корекції відповідно до виразності показань та бажаного рівня корекції. Показання, протипоказання, запобіжні заходи та застереження див. на етикетці препарату у вашій країні, регіоні або території.

Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з нами:

weMED
Medical & Aesthetic

ТОВ «ВІМЕД УКРАЇНА»
Україна, 01103, місто Київ,
вул. Верхогляда Андрія, 9
+38 (067) 611 56 55

info@wemed.com.ua